

新時代の身だしなみ。

Remozer

リムーザー

読みやすい!!

取扱説明書
脱毛器

家庭用

水洗い
できません

新時代の身だしなみ。

Remozer

リムーザー



- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(4～8ページ)を必ずお読みください。



Remozer公式LINEもチェック→



アフターケア、使用方法など、お役立ち情報はこちらで配信!!!

※公式LINEの掲載内容、QRは予告なく変更になることがございます。ご了承ください。

品番RMZ002

—感謝のお手紙—

この度は、数ある脱毛器の中からRemozerをお選びいただき誠にありがとうございます。

これから、ご友人やお客様など、大切な人にお会いになる機会もきっと増えていくことでしょう。また、オンラインで顔を合わせる際にも、お客様の印象をより良くし、きっとお役立ちしますので、ぜひRemozerをご活用ください。

また、最初の1-2ヶ月は特に、3-5日に一度の短いサイクルでお使いになって頂くと、毛の成長スピードがだんだんと遅くなっていくことを実感して頂きやすいかと思います。詳細については本書に記載されておりますので、よくお読みになってくださいね。

ご不明点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。Remozerが貴方にとって新しい身だしなみの習慣となり、人生が豊かになりますことを願っております。

Remozerスタッフ一同

目次

はじめに

安全上のご注意	P.4～9
パッケージ内容	P.10
各部のなまえ/ボタンについて	P.11

使い方

パッチテスト(ご使用前に)	P.13
使いかたの流れ	P.14～15
脱毛後のケア/すごし方	P.16
Remozerのお手入れ	P.17
使用可能部位	P.18
使用サイクル	P.19
ケアモードについて	P.20

こんなときは

よくある質問 (FAQ)	P.21～23
製品仕様・本体保証	P.24

安全上のご注意 必ずお守りください

- ・人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ・誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- ・本説明書の事項を守らないで生じる危害/損害などについては、責任を負いかねます。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

表示の説明



警告

「死亡、重症のおそれのある内容」
「軽症を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



禁止している内容です。



実行しなければならない内容です。



警告 肌や身体へのトラブルを防ぐために



禁止している内容です。


- ・ペースメーカーなどの体内植え込み型医療機器をお使いの方は、本体を医療用電子機器に近づけない
(体調不良や事故などの原因)
- ・**入れ墨**に照射しない
(やけどによるケロイドや赤くなるなどの炎症の原因)
- ・**目**に照射しない
- ・**アレルギー体質の方**
(化粧品、金属、衣類、太陽光で肌が荒れやすい方)



警告 肌や身体へのトラブルを防ぐために



禁止している内容です。

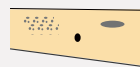

- ・次のような箇所への**使用厳禁**です
 - シミ、ほくろや日焼けした肌
 - 肌の黒い部分の部分
 - かさぶたや血管腫
 - 手術等整形部位
 - 目の周り、髪、衣類
(やけど、ケロイドや炎症の原因)



- ・メイク、日焼け止め、香水、汗が付着したまま使用しない
(洗い流し、乾いた素肌にすること)



- ・皮膚疾患のある方
(アトピー性皮膚炎、湿疹、ヘルペス、皮膚知覚障害など)



- ・妊娠中・生理中の方は使用しない
(ホルモンバランスが不安定なため)



- ・飲酒後は使用をお控えください



- ・アクセサリーなどの金属類を付けたまま使用しない

⚠ 警告 肌や身体へのトラブルを防ぐために

⊘ 禁止している内容です。



- ・薬を服用されている方は服用後1週間は使用しない
(薬によっては肌が光刺激に敏感になることがあります)

❗ 実行しなければならない内容です。



- ・薬を継続して服薬している方は皮膚科に相談すること



- ・肌に異常(炎症など)が発生した場合は使用を中止し、2日たっても炎症が続く場合には、皮膚科医に相談する



- ・製品の反射板や発光面の変形、割れ、破損がないか確認する



- ・使用中は必ずサングラスを着用すること

[HR(脱毛モード)]
[SC(美肌モード)]
[RA(にきびケアモード)]
詳細はP18にございます

- ・HR、SC、RAの3種のモードがありますが、同じ部位に複数のモードをお使いになる場合、お日にちを分けてご使用ください

⚠ 警告 電源は

❗ 実行しなければならない内容です。

100~240V




- ・必ず交流100~240Vで使用する



- ・電源をOFFにした後本体からACアダプターを抜くこと

電源OFF

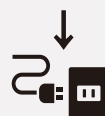

- ・必ず電源をOFFにしてからコンセントを抜くこと

⊘ 禁止している内容です。



- ・必ず専用のACアダプター以外は使用しないこと(故障、爆発の可能性があり大変危険です。)

※専用アダプターを紛失した場合一度弊社までお問い合わせください



- ・ACアダプター用プラグにピンやゴミを付着させない



- ・収納時にコードをアダプターや本体に巻き付けない

⚠ 警告 本体は

⊘ 禁止している内容です。




・絶対に分解・改造しないでください



・60%を超える**湿度**の高い**場所**で使用及び保管しないこと



・濡れた手で本体、電源を触らないこと

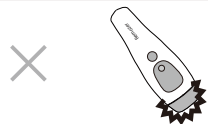

・落としたり、ぶつけたりしないでください

⚠ 実行しなければならない内容です。



・子どもの手に届くところに置かないようにすること

[以下の場合は直ちに使用を止め**電源プラグ**を抜いてください]

- ・変形したり**異常に熱い場合**
- ・焦げ臭い**におい**が**する場合**
- ・使用中**異常な音**が**する場合**

⚠ 警告 使用環境は

⚠ 実行しなければならない内容です。



・周囲に**人がいない**ことを**確認**してからご使用ください



・必ず白く明るいところで使用してください。
(オレンジの常夜灯などは剃り残しが見えにくいです。)



・室温**25℃前後**を目安に、夏は冷房の効いた涼しいお部屋で、冬は暖かいお部屋でお使いください。

湿度30%-60%




・湿度**30%-60%の環境下**で**ご使用**ください。
(湿度の範囲を超えると故障や怪我の危険性が高まります。)

加湿器やお風呂場など蒸気を発するものの近く、
また除湿機の近くなどは避けてお使いください。



パッケージ内容

脱毛器本体

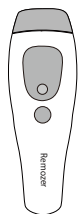

専用ACアダプター




日本語説明書




保護サングラス




アタッチメント

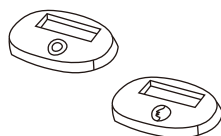

ホクロシール

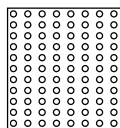

シェーバー

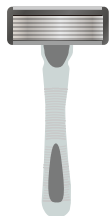

【専用収納ケースセットをご注文の方は
以下が付属されます。】

替え刃×3個



専用収納ケース



各部のなまえ/ボタンについて

【タッチパネル】

タッチすると光り、
モードが切替わります

- ⚡ : 脱毛モード
- : ニキビケアモード
- ☼ : スキンケアモード
- ❄ : 冷却ON(脱毛のみ)

【電源プラグ差し込み口】

必ず付属のACアダプターを
ご使用くださいませ
※他のアダプターを使うと
故障や火災の恐れが
ございます。

【電源 | 調整ボタン】

電源ON: コード挿入後
ボタンを押すとON
電源OFF: 長押し
2秒押すとOFF

レベル調整:
短く押すと
1~9段階
まで調整可能

【美容ランプ】

サイズ: 3cm²
最大出力: 18.5、6Jcm²

【アイスパッド】

肌を冷やすことで、
痛みを軽減します
※この部分には脱毛および
美容効果はございません

【照射ボタン】

長押しすることで
「AUTO」と「手動」モード
切り替わります

【吸気口】

ここから排熱します
※この部分は
塞がないでください

【レベルインジゲーター】


パワーレベルを表示します。
レベル調整ボタンを押す毎に
花びらの光る数が変わります。

【アタッチメント】



不要な波長を取り除き、肌へのダメージ
をカットします。ニキビモード、美肌
モードに取り付けてください。


次のページより
使い方の流れを説明します

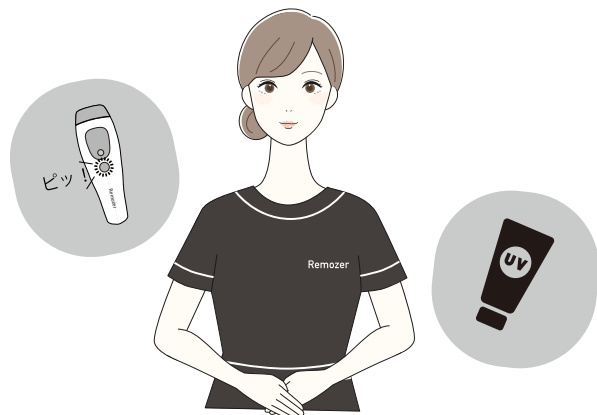


ヘア＆スキン適応色チェック表

×印の色にはご利用いただけません

ヘアカラーチェック

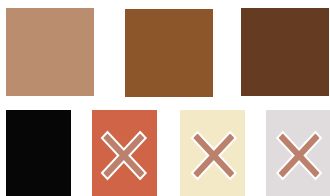

スキンカラーチェック

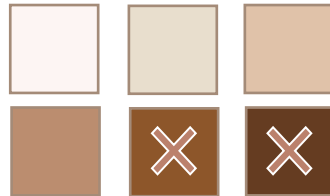

IPLは黒い色に反応します。黒すぎるとやけどの
原因になり、白すぎると反応しません！




パッチテスト(ご使用前に)

※ご使用前に**必ず**テストを実施してください

※顔、腕、足など使用したい**部位毎**に実施してください


※**1ヶ月**毎に行うことを推奨します

使用したい部位に
出力レベル1で1回照射します

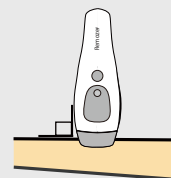

48時間後


OK

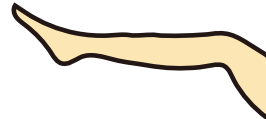

【肌に異常がない場合】
・テストしたレベルで
ご使用いただけます

・出力をあげる場合は
1レベルずつ上げて
テストしてください

NG

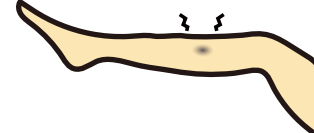

【肌に赤み、強い痛みが
2日以上続く場合】
・Lv1の場合：使用を中止
し皮膚科医に相談してくだ
さい
・Lv2以上の場合：
出力したレベル以上で使用
はできません。

使い方の流れ

(前半)

脱毛のコツ!



香水や化粧品などは入念に
洗い流し、乾かしましょう!



1


1: 汗や化粧品等を洗い流し、
除毛します。水滴が残らないように
しっかり拭き取りましょう

2



2: お肌の色を確認しましょう
*ほくろ、かさぶたに照射しない
よう ほくろシールを貼りましょう

3

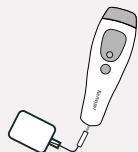

3: 本体と専用ACアダプターを
コンセントに接続します。
※ロックボタンを除く、
全てのボタンが点灯します。

4



長押し

4: コード挿入後、「電源 | Levelボタン」を
押すと電源ONになります。

5



6



5: 「電源 | Levelボタン」を短く押して
1-9段階のレベルを選択します。
※初めは必ずレベル1から
お試しください。

6: タッチパネルから脱毛、美肌、ニキビを
お選びください。
※起動時は脱毛モード、
冷却システムがONになっています。

7



7: Remozerご使用の際は必ず
サングラスをご着用ください

使い方の流れ

(後半)

脱毛のコツ!



お肌に密着させて照射
すると脱毛効果UP!!

8



8: 真っ直ぐ90°に立てしっかり肌に
当てると、レベルのインジケーターが
点滅し、照射可能になります。

9



9: 照射ボタンを押すと
IPLレーザーがでて照射されます。
※肌検知センサーにより照射面に
近づかないと照射されません。

10



長押し

10: 「電源/レベルボタン」を
約2秒長押しし電源OFFにします

11



11: プラグ・ACアダプターを抜き
専用ケースに保管します

■ [AUTO] モード



長押し



1: 肌に当てず、[Flash | 長押しAUTOボタン]を
約2秒長押しすると、AUTOに切替ります。
タッチパネル上で現在選択されているモードと、
[FLASH | 長押し AUTO] ボタンが点滅します。
※パワーが溜まり照射できるようになると
点灯に変わります。

2: 上記ボタンが点滅した状態で肌に当てると、
ボタンを押さずに自動で照射されます。
※レベルが低いほど連射スピードは速くなります。

■ ロックボタン



電源オンにした時、ロックボタンはオフの状態です。
ロックボタンを押すと照射ボタン以外をロックできます。
(使用中に誤って触れても機能が切替わりません)

脱毛後のケア/すごし方



脱毛後2時間以内は強い
日差しを浴びないなど
日焼け対策をしてください



脱毛後2週間は脱毛部位に
日焼け止めを塗ってください



保湿クリームや化粧水等で
美容効果&皮膚を守ります



脱毛後サウナ、日光浴、
温泉はお控えください

× 2時間以内NG



脱毛後2時間以内はお肌を
冷水などで冷やさないでください

照射した熱が
脱毛を促進します



[公式LINE]

アフターケアや脱毛のコツを
Remozer公式スタッフが発信！
公式LINEのご登録はこちら



Remozerのお手入れ

- ・乾いた布
- ・めがねのクリーナーなど



※必ず電源を切り、電源プラグを
抜いて本体を冷ましてから
お手入れを行ってください
※アルコール・除光液・洗剤などで
は拭かないでください



[美容ランプ/吸気口]

乾いた布・めがねのクリーナーなどで
やさしく拭き取ります。

[カミソリ替刃の交換の目安]

大切なお肌をお守りするため1週間を目安に交換しましょう
(除毛した毛量、面積によって異なります)




公式LINEにてアフターサポー
ト、脱毛のコツや新商品情報
などを発信中！
ご登録はこちらから



使用可能部位

○ご使用可能部位

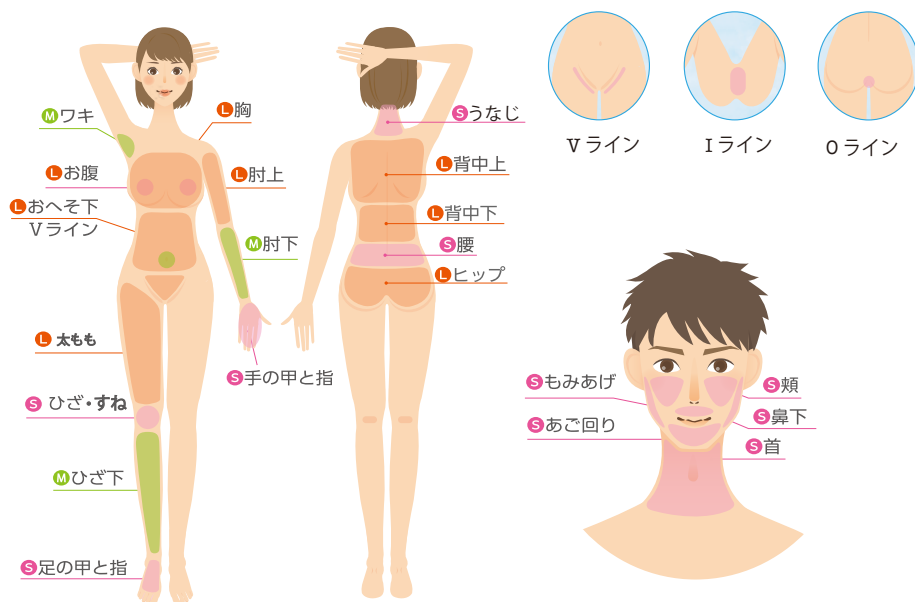

脱毛のコツ!


背中やVIOなど目視できない部位は
友人やパートナーと行うのがおすすめです!



(背中が届かない...)

(VIO見にくい...)

(自分でするの怖い...)

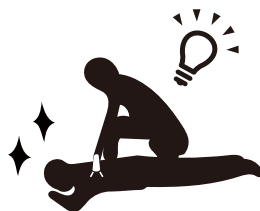

使用サイクル

●時間と照射は1日あたりの目安です。

部位	時間	照射数	使用サイクル(間隔)		
			初回～4週間	4～8週間	9週目以降
顔	約3分	40	3～5日に1回	1～2週間に1回	2～8週間に1回
腕(両方)	約4分	60			
ワキ(両側)	約2分	20			
胸	約4分	60			
背中	約8分	120			
ビキニライン	約2分	30			
脚(両方)	約7分	130			

※脱毛時間や頻度には個人差があります。

※効果が感じられない場合、3日に1回を限度にサイクルを早めて
お試しください

※同じ部位への照射は、間隔を空けた上で、3回を上限にしてください。

※照射部位を変えて次の日もご利用になる場合、
24時間以上空けてからご使用ください


※しばらく使用しなかった場合、パッチテストを行い
トラブルが起こらないか確認してからご使用ください

脱毛のコツ!

レベルを下げ、同じ箇所にも2-3回までを限度に間隔を空けて
照射すると、痛みも少なく脱毛効果が出やすいです。
髭やVIOなど、毛が太い、色の濃い部分に特におすすめ!



ケアモードについて

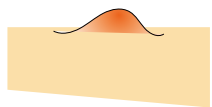

- RemozerはIPL技術を用いた3種のケアモードを搭載しております
- ※ ⚡❄️🔴 の3種モードは同じ部位に複数のモードをお使いになる場合、お日にちを分けてご使用ください



【脱毛モード】

熱に変えた光エネルギーを毛包に照射し、繰り返し使用することで、徐々にムダ毛が目立たなくなります。



【スキンケアモード】

IPLレーザーによりお肌のトーンが上がり、ハリとキメが整った美肌に導きます。



【ニキビケアモード】

IPLレーザーの技術を応用することでニキビ肌をケアし、健康的な肌をサポートします。

よくある質問（FAQ） 1 / 3

Q：脱毛器を使用する度にムダ毛は剃らないといけませんか？

A：はい、**必ず剃らなければいけません**。除毛は確実な脱毛と安全なご使用には不可欠です。

Q：照射したがムダ毛に変化はありません、なぜでしょうか？

A：この製品は**継続して使用することで効果があらわれます**。徐々に体毛の成長を抑え、脱毛を実現する仕組みです。説明書「使用サイクル」をご参考の上、引き続きご使用いただければと思います。

Q：急いで脱毛したいのですが毎日使用しても大丈夫ですか？

A：いいえ、毎日の使用はおすすめしません。体毛には成長サイクルがあります。**正しい使用サイクルでご使用ください**。基本的には1ヶ月目は3～5日に1回程度でご使用ください。体毛の成長速度が遅くなり、効果がではじめたら徐々に使用回数を減らしてください。詳しくは「使用サイクル」をご確認ください。

よくある質問（FAQ） 2 / 3

Q：皮膚にホクロやカサブタではない、黒いシミがありますが使用しても問題ないでしょうか？

A：いいえ、**黒いシミへの照射はできません**。この脱毛器の光は黒いものに反応いたします。そのため、ホクロ、カサブタ、シミには決して使用いただけません。
ただし、付属のホクロシールで黒いシミに照射されないようにした上であればご使用いただけます。

Q：何回も使用しましたが、他の人と比べ効果が薄い気がします。使い方を間違えているのでしょうか？

A：効果には**個人差があります**。使用サイクルや出力強度、使用部位により効果の現れ方に差が出ます。

Q：どの照射レベルが1番効果がありますか？

A：効果には**個人差があります**。**肌の色、毛の色によって差が出ます**。
例えば肌の色が濃い人ほど照射レベルは低くなります。
まずは低いレベルから始めて徐々にレベルをあげてください。

※パッチテストでお肌に異常が生じる場合は出力を下げるか、ご使用を中止してください。

よくある質問（FAQ） 3 / 3

Q：照射すると痛みますか？

A：わずかに痛みを感じる可能性があります。それは脱毛器を使用する過程でメラニン色素が光に反応し熱が発生することから来る痛みです。肌質によっても痛みの程度には個人差があります。

痛みが強いと感じる場合は照射レベルをさげてください。

トラブルシューティング

トラブル例	考えられる原因	対処方法
電源がONにならない ①	・ACアダプターを接続していない ・タコ足配線等で電圧が足りていない ・接続不良	・ACアダプターをしっかりと接続する ・拡張プラグを使わず直接コンセントに差す
電源がONにならない ②	・電源ボタンをしっかりと押せていない ・電源ボタンを2秒以上押せていない	・電源ボタンを押す際、少し力を入れ2秒以上長押しをする
照射できない	・照射面が皮膚に密着していない ・充電が切れておりライトが点滅しない状態になっている ・使用できる照射数が残っていない	・照射面を皮膚に密着させる ・ライトが点滅してからもう一度照射ボタンを押してください
勝手に電源が切れる	・約5分間にも操作がなければ自動的に電源がOFFになります	・電源ボタンを2秒以上長押ししてもう一度電源を入れてください
OFF後もファンがなる	・製品仕様になります。 内部パーツの排熱を促しより長持ちするようになっております	・ファンが鳴り止むまでお待ちください

製品仕様・本体保証

光源タイプ	IPL	入力	100~240V,50-60H,<48W
照射面積	3cm ²	操作ボタン	凸面ボタン、タッチパネル
照射回数	999,999回	レベル調節	1~9段階
本体サイズ	212*71.8*54mm	*推奨環境	温度：5~35℃ 湿度：30~60%
本体重量	270g	本体保証	購入より3ヶ月間有効

*説明書に記載されている注意事項や警告等をまもり、正しく使用されていた場合に限りです。

*ご注文日より90日間有効になります。

店頭で購入された場合は、レシートを大切に保管してください。

ネットで購入された場合は、注文番号をお控えください。

【もし、FAQで解決しなかった場合】

・Remozer LINE公式アカウント

LINEチャットボットが「24時間365日」

お問い合わせを受け付けております



また、お得な情報・お役立ち情報も配信予定ですのでお見逃しなく！！

- ・もっと脱毛にくわしくなりたい！
- ・説明書だけではわからなかった！
- ・カミソリの替え刃が安く欲しい！！
- ・よかったからプレゼントしたい！

そんなあなたは公式LINEへどうぞ！



公式  はこちら

Q リムーザー で検索！！



【もし気に入っていただいた場合は...】

- ・ぜひご購入されたショップへレビューをお願いします！
レビューを頂けますと注文を検討いただいている方の参考になります。
またRemozerを少しでも気に入っていただけた場合は、ぜひ星5をつけて頂けると我々の励みにもなります。
普通だった場合は星4を評価ください。

